

PORTUGUÊS



ALMOFADAS SUB-DIGITAIS com Epithelium™

INDICAÇÕES

Dedos do pé em martelo, dedos do pé em garra, calos pulpares, pés cavos.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- Casos de pessoas que sofrem de arterite, diabetes, polineurite, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras: pergunte ao seu médico ou podologista, em seguida, monitorizar o seu pé durante a utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Lavar antes da 1ª utilização.
- Segurar a almofada, colocando-a com a face curva virada para cima.
- Passar o elástico à volta do 3º dedo do pé, de modo a que o 2º dedo fique apoiado sobre a parte mais larga da almofada.
- Posicionar a almofada no espaço existente sob os dedos do pé.
- Calçar uma meia ou "collant", para um melhor suporte.

FUNCIONALIDADES

- Este dispositivo permite que os dedos do pé se alonguem confortavelmente e deste modo, evita a posição dos dedos "em garra". Limita a formação de calos pulpares e dorsais que, normalmente, estão associados a esta patologia.
- Devido à sua forma ergonómica, a almofada adapta-se na perfeição ao espaço existente sob os dedos do pé. Fabricado em gel de Epithelium™, coberto de tecido, torna-se extremamente confortável.




CONSERVAÇÃO

- Lavável na máquina a 30°C, no interior do saco de lavagem fornecido ou manualmente (sem esfregar).
- Deixar secar naturalmente.

COMPOSIÇÃO: 90% silicone, 10% de tecido em poliamida/elastano.

Os materiais foram submetidos a todos os ensaios previstos e impostos pela ISO 10 993-1 relativa aos produtos que entram em contacto com a pele. Se ocorrer algum incidente com a utilização do produto deverá interromper imediatamente a sua utilização e informar a empresa MILLET Innovation.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. O idioma de referência es el francés. Marcado CE inicial: 2003.

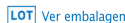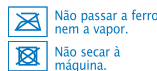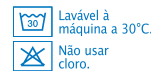

ESPAÑOL



RATONCILLOS SUBDIGITALES con Epithelium™

INDICACIONES

Evitar la formación de callos pulpares en los dedos en martillo e impedir la fijación de los dedos garra.

CONTRAINDICACIONES

- No lleve sobre una lesión cutánea.
- En el caso de las personas que sufren arteritis, diabetes, polineuritis, neuropatías de los miembros inferiores o de úlceras: deben solicitar consejo a su médico o podólogo, y a continuación, mantener la vigilancia de su pie durante su uso.

PRECAUCIONES DE USO

- Lavar antes del primer uso.
- Tome el ratoncillo subdigital sosteniéndolo con la cara abombada hacia arriba.
- Pase la goma alrededor del tercer dedo, de manera que el segundo dedo quede apoyado sobre la parte más ancha del ratoncillo subdigital.
- Coloque el ratoncillo subdigital en el espacio situado bajo los dedos de los pies.
- Póngase el calcetín o la media por encima para una mejor sujeción.

FUNCIONES

- Hechas de Epithelium™, los ratoncillos subdigitales permiten estirar cómodamente los dedos de los pies que tienen tendencia a plegarse. Impiden la fijación de los dedos garra y limitan la formación de los callos pulpares y dorsales.
- Gracias a su forma ergonómica y a las asombrosas propiedades viscoelásticas del Epithelium™, las tiras se adaptan perfectamente al espacio situado bajo los dedos de los pies.



MANTENIMIENTO

- Lave en lavadora a 30°C, dentro de la redecilla de lavado proporcionada, o a mano (sin frotar).
- Deje secar sal aire libre.

COMPOSICIÓN: 90% de silicona, 10% de tejido de poliamida/elastano.

Los materiales de la rodillera se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. O francés é o idioma de referência. Marcação CE inicial: 2003.

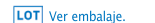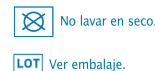

DANSK



FORFODSPELOTTE med Epithelium™

INDIKATIONER

Forebygger ligtorne på spidsen af hammertæer, samt modvirker klotå.

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- Hvis det drejer sig om personer, der lider af arteritis, diabetes, polyneuritis eller neuropati i underkøstremiteterne eller bensår: Rådspørg en læge eller en fodlæge og hold opsyn med foden under anvendelse af tåbeskyttelsen.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Vask før første anvendelse.
- Tag fat om indlægget, således at den hvælvede side vender opad.
- Sæt elastikken omkring den 3. tå, således at den 2. tå hviler på den bredeste del af indlægget.
- Placér indlægget i hulrummet under tærerne.
- Tag strømper på for at holde indlægget på plads.

FUNKTIONSEVNE

- Forfodsindlæggen, fremstillet i Epithelium™ gel, hjælper med at en behagelig måde at rette tæer ud, som har tendens til at bøjes. De modvirker at tærerne stivner i klob og begrænser dannelsen af ligtorne på tåryg og tåspids.
- I sæt af deres ergonomiske form og Epithelium™ gelsens bemærkelsesværdige viskoelastiske egenskaber tilpasser indlæggen sig perfekt til hulrummet under tærernes grundled.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vaskes i maskine ved 30°C i det medfølgende vaskenet eller i hånden (uden at gnutte).
- Lad lufttørre.

SAMMENSÆTNING: 90% silikone, 10% stof i polyamid/elastan.

Materiernerne har været genstand for alle påkrævede, lovbestemte tests ifølge standarden ISO 10 993-1 om produkter, som er i kontakt med huden. Hvis der træffes indtræffe en hændelse, stands straks brugen af produktet og underret MILLET Innovation herom.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindeligt CE-mærkning: 2003.



SVENSKA



TÅLEDSKUDDAR med Epithelium™

ANVISNINGAR

Förhindrar liktornar på hammartår och motverkar krökta tår.

VARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- Personer som lider av artrit, diabetes, polyneurit, muskelatrofi i benen eller åderbräck bör rådfråga sin läkare eller fotvårdsspecialist samt övervaka foten under användningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Bör tvättas innan den första användningen.
- Tag ut kudden och håll den med den välvda sidan uppåt.
- Fäst resåren runt den tredje tån så att den andra tån får stöd mot tåledskuddens tjockaste del.
- Placera kudden under tårna.
- Ta på dig strumpor, knästrumpor eller strumpbyxor utanpå för bästa möjliga stöd.

FUNKTIONER


- Tåledskuddar tillverkade av Epithelium™ som gör att tår som tenderar att kröka sig kan sträckas ut på ett behagligt sätt. Kuddarna motverkar klotår och begränsar uppkomsten av liktornar på tåspetsarna och tårnas ovasida.
- Tåledskuddarna av Epithelium™ är ergonomiskt utformade, har avancerade viskoelastiska egenskaper och formar sig därför perfekt under framfoten.

UNDERHÅLL

- Maskintvättas i 30°C i den medföljande tvättpåsen eller för hand (utan att gnugga).
- Låt lufttorka.

SAMMANSÄTTNING: 90% silikon, 10% polyamid-/elastanväv.

Materialen har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underrätta företaget MILLET Innovation. Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2003.

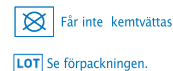

SUOMALAINEN



Epithelium™ –GEELISTÄ VALMISTETUT VASARAVARPAIDEN OIKAISIJAT

KÄYTTÖTARKOITUS

Ehkäistä kovettumien syntymisen vasaravarpaisiin ja estää koukkuvarpaiden syntymisen.

VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehduksista, diabeteksesta, polyneuritiista, alaraajojen neuropatiasta tai säärihaavoista: kysy neuvoa lääkäriltä tai jalkahoitajalta ja tarkkaile jaljoja käytön aikana.

VAROTOIMENPITEET

- Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Ota oikaisija käteen kupera puoli ylöspäin.
- Pujota lenkki 3. varpaan ympärille niin, että 2. varvas tukeutuu oikaisijan paksuuta osaa vasten.
- Aseta oikaisija varpaiden alla olevaan tilaan.
- Pue sukka tai sukkahousut oikaisijan päälle varmistamaan sen pysyminen paikallaan.

TOIMINTA

- Epithelium™-geelistä valmistettujen vasaravarpaan oikaisijoiden avulla koukistumaan pyrkivät varpaat suoristuvat miellyttävällä tavalla. Oikaisijat ehkäisevät koukkuvarpaiden syntymistä ja vähentävät kovettumien ja liikkavarpaiden muodostumista.
- Ergonomisen muotonsa ja Epithelium™-geelin viskoelastisten ominaisuuksien ansiosta oikaisijat mukautuvat täydellisesti varpaiden alapuoliseen tilaan.

HOITO

- 30°C konepesu mukana toimitetussa pesupussissa tai käsinpesu (älä hankaa).
- Anna kuivua itsestään.

KOOSTUMUS: 90% silikonia, 10% polyamid-/elastanikangasta.

Tuote on käynyt läpi kaikki testit normin ISO 10 993-1 mukaan, joka koskee tuotteita, jotka ovat suorassa ihokontaktissa. Jos tästä huolimatta ongelmia, käyttö on syytä lopettaa heti ja asiasta on ilmoitettava MILLET Innovation -yhtiölle. MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viittausta kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2003.



FRANÇAIS



BARRETTES SOUS-DIAPHYSAIRES à l'Epithelium™

INDICATIONS

Orteils en marteau, orteils en griffe, cors pulpaire, pieds creux.

CONTRE INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polyneuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères: demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1ère utilisation.
- Prendre la barrette en la tenant face bombée sur le dessus.
- Passer l'élastique autour du 3ème orteil de façon à ce que le 2ème orteil se trouve appuyé sur la partie la plus large de la barrette.
- Positionner la barrette dans l'espace situé sous les orteils.
- Enfiler la chaussure, le bas ou le collant par-dessus pour un meilleur maintien.

FONCTIONNALITÉS

- Ce dispositif permet aux orteils de s'allonger confortablement et d'éviter ainsi la fixation des orteils en griffe. Il limite la formation de cors pulpaire et dorsaux qui sont souvent associés à cette pathologie.
- De par sa forme, la barrette s'adapte parfaitement à l'espace situé sous les orteils : Elle est réalisée dans un matériau recouvert de tissu, au contact très agréable, appelé Epithelium™.


ENTRETIEN

- Lavables en machine à 30°C dans le filet de lavage ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement.

COMPOSITION : 90 % silicone, 10 % tissu polyamide/élasthanne.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2003.

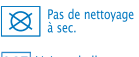

MILLET INNOVATION

MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorient/Drôme-FRANCE

contact@epitact.com
www.epitact.com

Ref. 10634-1 - 04-2019

ENGLISH

HAMMER TOE CUSHIONS

with Epithelium™

INDICATIONS

Hammer, claw toes, corns at the end of the toes...

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- Persons with arteritis, diabetes, polyneuritis, peripheral neuropathy, or foot ulcers: consult your physician or chiropodist before application and monitor your foot during use.

PRECAUTIONS FOR USE

- Wash before first use.
- Hold the Hammer toe Cushion by the rounded top part.
- The elastic strap slips over the third toe. The largest part of the Cushion needs to be under the second toe.
- Place the Hammer toe Cushion in the free space at the base of the toes.
- Then slip on socks, stockings or tights to secure the Cushion in the proper position.

WHAT IT IS USED FOR

- The Hammer toe cushion makes the toes feel comfortable by maintaining them firmly in good position and thus limits the formation of corns on the tip.
- Its shape allows it to adapt to the space under the toes without causing any discomfort. The Hammer toe Cushion is filled with a material, covered by soft fabric, called Epithelium™.


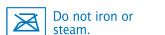
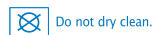



LASTING QUALITY

- Machine washable at 30°C in the mesh laundry bag or by handwash (no twisting nor rubbing).
- Air dry. Do not iron.

COMPOSITION: 90% silicone, 10% polyamide/elastane fabric.

The materials used have passed all the regulatory tests required by ISO standard 10993-1 relating to products that come into contact with the skin. If an incident occurs, stop using the product immediately and inform MILLET Innovation.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2003.

 Machine washable at 30°C.	 Do not iron or steam.	 Do not dry clean.
 Do not bleach.	 Do not tumble-dry.	 See packaging.

epitact®

NEDERLANDS

TEENSTAAFJES met Epithelium™

INDICATIES

Voorkomen van likdoorns op de toppen van hamertenen en vorming van klauwtenen.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of zweren: vraag raad aan uw arts of podoloog, vervolgens uw voet opvolgen gedurende het gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Wassen vóór 1^{ste} gebruik.
- Pak het staafje vast met de bolle kant naar boven.
- Installeer het elastiek rond de 3e teen, zodat de 2e teen op het breedste gedeelte van het staafje drukt.
- Plaats het staafje in de ruimte onder de tenen.
- Doe de sok, de kous of de panty er over aan voor een betere bevestiging.

FUNCTIONALITEIT

- De staafjes voor onder de diafyse zijn gemaakt van Epithelium™. Hierdoor worden tenen die de neiging hebben om te krommen comfortabel gestrekt. Zij voorkomen de vorming van klauwtenen en beperken het ontstaan van likdoorns op de toppen of gewrichten van de tenen.
- Dankzij de ergonomische vorm en de opmerkelijke visco-elastische eigenschappen van Epithelium™ passen de staafjes zich perfect aan de ruimte onder de tenen aan.

ONDERHOUD

- In de machine wassen op 30°C, in het bijbehorende wasnet of op de hand (zonder wrijven).
- Aan de lucht laten drogen.

SAMENSTELLING: 90% siliconen, 10% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruiksadvisies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2003.

 Machine wasbaar op 30°C.	 Niet strijken, geen stoom.	 Geen droogkuis.
 Niet bleken.	 Niet drogen in de droogtrommel.	 Zie verpakking.

epitact®

DEUTSCH

ZEHENDRUCKSCHUTZPOLSTER aus Epithelium™

INDIKATION

Zur Vorbeugung von Hühneraugen auf Hammerzehen und zur Vermeidung der Versteifung von Krallenzehen.

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Bei Arterititis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Ulcera: fragen Sie Ihren Arzt, und beobachten Sie Ihren Fuß während der Verwendung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Halten Sie das Zehenpolster mit der gewölbten Seite nach oben.
- Streifen Sie den Gummiband-Ring über den mittleren Zeh, sodass der zweite Zeh auf der breitesten Stelle des Zehenpolsters aufliegt.
- Platzieren Sie das Zehenpolster unter den Zehen.
- Für einen besseren Halt, ziehen Sie einen Strumpf oder eine Strumpfhose darüber.

EIGENSCHAFTEN

- Diese Zehenpolster aus Epithelium™ ermöglichen ein bequemes Strecken von Zehen mit Tendenz zu Fehlstellungen (Hammerzehen). Sie vermeiden die Versteifung von Krallenzehen und verringern die Bildung von Hühneraugen an den Zehenspitzen und auf den Zehen.
- Aufgrund ihrer ergonomischen Form und der hohen Viskoelastizität von Epithelium™ passen sich die Zehenpolster perfekt an den Raum unter den Zehen an.

REINIGUNG

- In der Waschmaschine bei 30°C im mitgelieferten Wäschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- An der Luft trocknen lassen.

ZUSAMMENSETZUNG: 90% Silikon, 10% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2003.

 Maschinenwäsche 30°C.	 Nicht bügeln (kein Dampf).	 Nicht chemisch reinigen.
 Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.	 Nicht maschinenrocknen.	 Siehe Verpackung.

epitact®

ITALIANO

BARRETTE SOTTO-DIAFISARIE all'Epithelium™

INDICAZIONI

Per prevenire i calli sulle dita a martello ed evitare le dita ad artiglio.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Per le persone che soffrono di arterite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcere: chiedere consiglio al vostro medico o al vostro podologo, e controllare il piede durante l'utilizzo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Lavare prima del primo utilizzo.
- Prendere la barretta tenendola dalla parte bombata sulla parte superiore.
- Passare l'elastico attorno al terzo dito in modo tale che il secondo dito si trovi appoggiato alla parte più larga della barretta.
- Posizionare la barretta nello spazio situato sotto le dita.
- Infilare la calza o il collant sopra, per una migliore stabilità.

FUNZIONALITÀ

- Le barrette sotto-diafisarie in Epithelium™, permettono di allungare comodamente le dita con tendenza a ripiegarsi. Evitano così la formazione di dita ad artiglio e limitano la formazione di calli dorsali e ai polpastrelli.
- Grazie alla loro forma ergonomica e alle straordinarie proprietà viscoelastiche dell'Epithelium™, le barrette si adattano perfettamente alla zona situata sotto le dita dei piedi.







MANUTENZIONE

- Lavare in lavatrice a 30°C nella retina di lavaggio in dotazione, o a mano (senza sfregare).
- Lasciare asciugare naturalmente.

COMPOSIZIONE: 90% silicone, 10% poliamide/elastan.

I materiali sono stati sottoposti a tutti i test regolamentari imposti dalla norma ISO 10 993-1 relativa ai prodotti che entrano in contatto con la pelle. Si dovesse verificare un problema, conviene interrompere immediatamente l'utilizzo e informare la società MILLET Innovation.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2003.

 Lavabile in lavatrice a 30°C.	 Non stirare e non trattare con vapore.	 Non lavare a secco.
 Non sottoporre a candeggio.	 Non asciugare in asciugatrice.	 Vedere la confezione.

epitact®

NORSK

TÅLEDDSPUTER med Epithelium™

INDIKASJONER

Forebygger liktørner på hammertær og motvirker klotær.

KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- For personer som lider av arteritt, diabetes, polynevritt, nevropati i bena eller ulcus: be lege eller fotterapeut om råd, og hold øye med foten din under bruk.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Må vaskes før bruk.
- Hold puten med den buete siden opp.
- Fest strikken rundt den tredje tåen slik at tå nummer to hviler på den tykkeste delen av tåleddsputene.
- Plasser puten under tærne.
- Bruk sokker, strømper eller strømpebukse utenpå for å få best mulig støtte.

FUNKSJONER

- Tåleddsputene med Epithelium™ gjør at tær som har en tendens til å krøke seg sammen kan strekkes ut på en komfortabel måte. Putene motvirker klotær og reduserer dannelsen av liktørner på tærne.
- Tåleddsputene med Epithelium™ er ergonomisk utformet med avanserte viskoelastiske egenskaper og vil derfor forme seg perfekt under forfoten.

VEDLIKEHOLD

- Vaskes i maskin på 30°C i medfølgende vaskepose, eller for hånd (uten å gni).
- La lufttørke.

SAMMENSETNING: 90% silikon, 10% stoff av polyamid/elastan.

Materialene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO-standarden ISO 10 993-1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2003.

 Kan vaskes i maskin ved 30°C.	 Må ikke strykes eller dampes.	 Må ikke tørkes i tørketrommel.
 Må ikke vaskes i klor eller klorox.	 Må ikke tørkes i maskin.	 Se emballasjen.

epitact®

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ με Epithelium™

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προλαμβάνουν το σχηματισμό σκληρών κάλων στα δάχτυλα των ποδιών που πάσχουν από σφυροδακτυλία και αποτρέπουν τη μοιμοποίηση της γαμφοδακτυλίας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Περίπτωση ατόμων με αρθρίτιδα, διαβήτη, πολυνευρίτιδα, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή εξέλκωμα: ζητήστε συμβουλές από τον ιατρό ή τον ποδολόγο σας και στη συνέχεια παρακολουθήστε το πόδι σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση.
- Πάρτε στα χέρια σας το μαξιλαράκι κρατώντας το με την καμπυλωτή πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.
- Περάστε το λαστιχάκι γύρω από το 3ο δάχτυλο του ποδιού, έτσι ώστε το 2ο δάχτυλο να ακουμπά στο πλατύτερο τμήμα.
- Τοποθετήστε το μαξιλαράκι στο κενό που υπάρχει κάτω από τα δάχτυλα του ποδιού.
- Φορέστε από πάνω κάλτσα ή καλσόν, ώστε το μαξιλαράκι να στερεωθεί στη θέση του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Φτιαγμένα από Epithelium™, τα ειδικά μαξιλαράκια τοποθετούνται κάτω από τη διάφυση και επιτρέπουν να τευώνονται με ευκολία τα δάχτυλα των ποδιών που έχουν την τάση να αναδιπλώνονται. Αποτρέπουν τη μοιμοποίηση της γαμφοδακτυλίας και περιορίζουν τη δημιουργία σκληρών κάλων και κάλων στις αρθρώσεις.
- Χάρη στο εργονομικό τους σχήμα και στις εξαιρετικές ισοθελαστικές ιδιότητες του Epithelium™, τα μαξιλαράκια εφαρμόζουν άσπρα στο κενό που υπάρχει κάτω από τα δάχτυλα των ποδιών.







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C, μέσα στο δίχτυ πλυσίματος που παρέχεται ή στο χέρι (χωρίς τρίψιμο).
- Αφήστε να στεγνώσει ελεύθερα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 90% σιλκόνη, 10% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστίνη.

Τα υλικά έχουν υποβληθεί σε όλες τις κανονιστικές δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10 993-1 σχετικά με τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περιστατικού θα πρέπει να διακοφτεί αμέσως η χρήση, και να και να ενημερώσετε την MILLET Innovation.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση CE: 2003.

 Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C.	 Δεν σιδερώνεται, ούτε και με ατμό.	 Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθαρίσμα.
 Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.	 Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο.	 Δείτε συσκευασία.

epitact®