

DANSK



SVENSKA



SUOMALAINEN




NORSK



ΕΛΛΗΝΙΚΑ



PREVENTIVE PROTECTORS

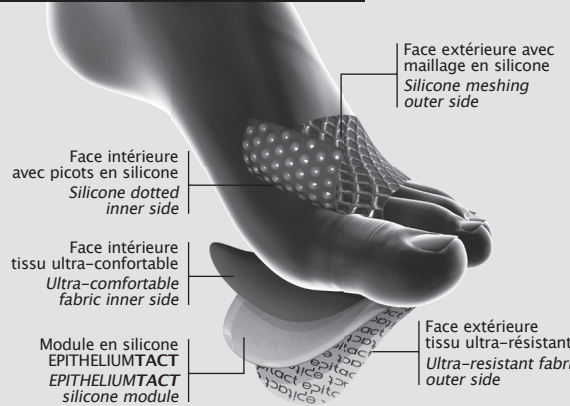

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS
DISTRIBUTION OF PRESSURE AND FRICTION

DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT:
DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE:




Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.
www.epitactsport.com

PROTECTIONS PLANTAIRES EPITHELIUMTACT 05



PLANTAR PROTECTORS / FUSSSOHLEN-SCHUTZ / PROTEZIONI PLANTARI / PROTEÇÕES PLANTARES / VOORVOETBESCHERMERS / PROTECCIONES PLANTARES / FODBALLE BESKYTTELSE / FRAM-FOTSSKYDD / JALKAPOHJASUOJAT / BESKYTTELSPLASTER FOR FORFOTEN / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

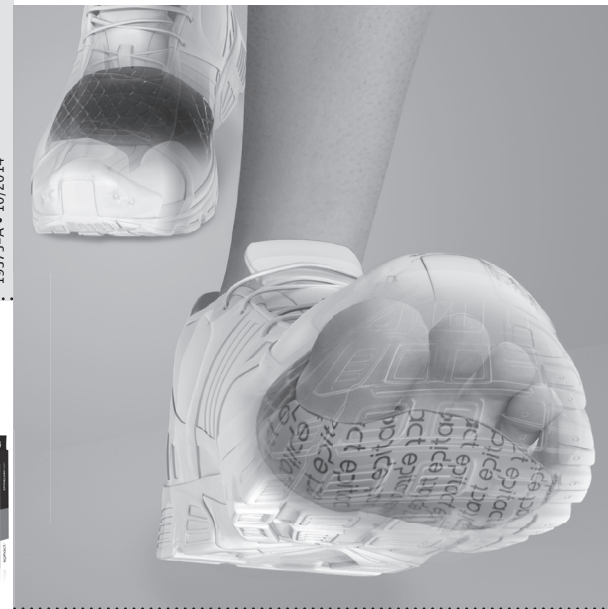


19375-A • 10/2014

MILLET Z.A. Champgrand - BP 64 - 26270 Loriol/Drôme - FRANCE
Tel: +33 (0) 820 026 027 www.epitactsport.com

FODBALLE BESKYTTELSE

EPITHELIUMTACT 05 beskyttelse til fodbold har en kun 1,7 mm tyk silikonegelé, der er specielt udviklet til at fordele tryk på en effektiv måde og absorbere gnidninger uden at skabe ustabilitet under forfoden. De lindrer således smerter og forebygger risici for opvarmning, forbrændinger, dannelse af vabler og hård hud.

- GODE RÅD OM BRUG:**
- Disse beskyttelse skal bruges direkte mod huden.
 - Tag fodbold beskyttelse på og anbring stroppen mellem storetåen og den anden tå (1).
 - De selvblokerende dupper i silikone (stroppens inderside) skal være i kontakt med huden og netværket i silikone (stroppens yderside) skal være i kontakt med strømpen.
 - Juster fodbold beskyttelse position ved tærnes base (2) uden at strække stroppen for meget.
 - For en optimal fastholdelse, skal man ikke være barfodet men tage strømper på over beskyttelse. Kom ikke fugtpleje på huden før brug.

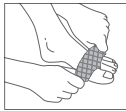


VEDLIGEHOJDELSE:

- Vaskes i maskine ved 40°C eller i hånden (uden at skrubbe), lad tørre naturligt. Må ikke stryges.

VIGTIGT! For at sikre en god fastholdelse er det nødvendigt at vaske produktet efter hver brug.

- KONTRAIKATIONER:**
- Denne produkt er blevet testet i henhold til de lovbestemte krav i standarden ISO 10993-1 om produkter bestemt til at komme i kontakt med huden. Hvis der alligevel observeres en hudreaktion, stands straks anvendelsen af produktet og underret MILLET Innovation.
 - Må ikke bruges over et ubeskyttet sår.
 - Denne produkt må ikke bruges af personer som lider af arteritis, diabetes, polyneuritis eller neuropati i underkæberemitterne.



SAMMENSÆTNING: 74 % silikone, 26 % stof i polyamid/elastan. MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

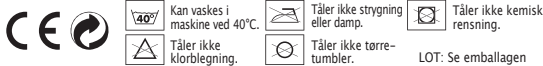

FRAMFOTSSKYDD

FRAMFOTSSKYDDEN EPITHELIUMTACT 05 inneholder ett silikongel som bara är 1,7 mm tjockt. Skydden har utveckats särskilt för att på effektivt sätt fördela trycket och absorbera friktionen utan att skapa en instabilitet under framfoten. De lindrar smärta och förebygger risken för överhettning, brännskador, blåsbildning och förhårdnader..

- ANVÄNDNINGSRÅD:**
- Dessa skydd ska användas direkt på huden.
- Sätt på framfotsskyddet och placera stödbandet mellan stortån och tån bredvid stortån (1).
 - De blockerande silikonpiggarna (på insidan av bandet) ska vara i kontakt med huden och silikonmaskorna (på utsidan av bandet) i kontakt med strumpan.
 - Anpassa framfotsskyddets läge vid tårnas bas (2) utan att dra för mycket i bandet.
 - För bästa möjliga stöd ska skyddet användas under en strumpa. Applicera inte fuktande hudvårdsprodukter före användningen.

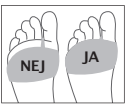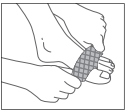

SKÖTSEL:

- Maskintvätt 40°C eller handtvätt (utan att gnugga). Låt lufttorka. Får inte strykas.

VIKTIGT! Det är nödvändigt att tvätta skydden efter varje användning för att garantera ett bra stöd.

- KONTRAIKATIONER:**
- Produkten har genomgått alla tester som föreskrivs av ISO-standard 10993-1 som avser produkter som kommer i kontakt med huden. Om en hudreaktion ändå skulle uppstå bör du genast sluta att använda produkten och underretta företaget MILLET Innovation.
 - Använd inte på öppet sår.
 - Personer som lider av artärinflammation, diabetes, polyneurit eller muskelfatrofi i benen får inte använda produkten.


SAMMANSÄTTNING: 74 % silikon, 26 % polyamid-/elastanväv. Företaget MILLET Innovation kan inte hållas ansvarigt om produkten har använts på ett sätt som inte överensstämmer med tillverkarens rekommendationer.



JALKAPOHJASUOJAT

JALKAPOHJASUOJAT EPITHELIUMTACT 05 sisältävät ohuen 1,7 mm silikonigeelikerroksen, joka on kehitetty erityisesti jakamaan paineen tasaisesti ja vähentämään hankautumista tekemättä jalkapohjan etuosaa epävakaaksi. Siksi ne helpottavat kipua ja ehkäisevät kuumenemistä ja nirhaumia sekä rakkojen ja känsien muodostumista..

- KÄYTTÖOHJEET:**
- Näitä suoja käytetään suoraan iholla.
- Aseta jalkapohjasuojus paikalleen ja ohjaa pitoliuksia isovarpaan ja etuvarpaan väliin (1).
 - Silikonisten pysäytysnystyröiden (pitoliuskan sisä-sivulla) on kosketettava ihoon ja silikoniverkon (pitoliuskan ulkosivulla) on kosketettava sukkaan.
 - Säädiä jalkapohjasuojan asento varpaiden juureen (2) venyttämättä pitoliuksia liikaa.
 - Jalkapohjasuojat pysyvät parhaiten paikoillaan, kun käytät niiden päällä sukkaa etkä juokse paljain jaloin. Älä levitä kosteutta kauneudenhoitotuotteita iholle ennen käyttöä.

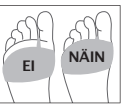


HOITO:

- Konepesu 40 °C tai käsipesu (hankaamatta), anna kuivua vapaasti. Ei saa silitää.

TÄRKEÄÄ! Jotta suojan pysyminen paikoillaan voidaan taata, se on ehdottomasti pestävä aina käytön jälkeen.

- VASTA-AIHEET:**
- Tuotteelle on tehty kaikki standardissa ISO 10993-1 ihon kanssa kosketukseen joutuvilta tuotteilta edellytetyt testit. Jos huomaat tästä huolimatta ihoreaktioita, käyttö on syytä lopettaa heti ja asiasta on ilmoitettava MILLET Innovation -yhtiölle.
 - Ei saa käyttää suojaamattoman haavan päällä.
 - Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehduksista, diabeteksesta, polyneuritiasta, alaraajojen neuropatiasta eivät saa käyttää tuotetta.


KOOSTUMUS: 74 % silikonია, 26 % polyamidi-/elastaanikangasta. MILLET Innovation ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti.

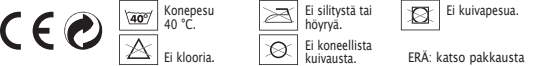

BESKYTTELSPLASTER FOR FORFOTEN

BESKYTTELSPLASTERNE FOR FORFOTEN EPITHELIUMTACT 05 inneholder et 1,7 mm tynt lag med silikongel som er spesialutviklet for å fordele trykket effektivt og absorbere gnissing uten at forfoten blir ustabil. Plastrer lindrer også smerter og virker forebyggende mot høy temperatur, sviing, blødder og hard hud.

- BRUKSANVISNING:**
- Disse plastrer brukes direkte på huden.
- Trekk på forfotplasteret og sett stroppen mellom stortåa og tåa ved siden av (1).
 - Silikonlagene (innside av stroppen) skal være i kontakt med huden, og silikonnettet (utside av stroppen) skal være i kontakt med sokken.
 - Juster plasteret slik at det ligger rett nedenfor tærne (2) uten å dra for hardt i stroppen.
 - Plasteret bør helst brukes med en sokk som holder plasteret på plass, og ikke barfoot. Fukthighetsprodukter må ikke påføres før bruk.

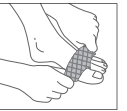


VEDLIKEHOLD:

- Vaskes i maskin ved 40°C eller for hånd (uten å skrubbe), og la det lufttørke. Må ikke strykes.

VIKTIG! Beskyttelsesplastrer må vaskes etter hver bruk for at de skal holde formen.

- TILSTANDER SOM TALER MOT BRUK AV PRODUKTET:**
- Produktet er testet i henhold til ISO-standard 10993-1 og de reglene i standarden som gjelder produkter som er i kontakt med huden. Dersom du likevel skulle få en reaksjon i huden, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.
 - Må ikke brukes direkte på åpne sår.
 - Personer med årebetennelse, diabetes, polynevit, nevropati i nedre ben må ikke bruke produktet.

SAMMENSÆTNING: 74 % silikon, 26 % stoff av polyamid/elastan. Selskapet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk som ikke samsvarer med produsentens anbefalinger.

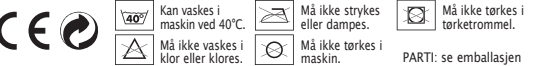

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ EPITHELIUMTACT 05 ενσωματώνουν ένα τζελ σιλικόνης πάχους μόλις 1,7 mm το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για την αποτελεσματική κατανομή των πιέσεων και την απορρόφηση της τριβής, δίχως να δημιουργεί αστάθεια στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Έτσι, ανακουφίζουν από τον πόνο και αποτρέπουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, εγκαύματος, σχηματισμού φυλκταιών ή τυλωμάτων.

- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**
- Τα προστατευτικά χρησιμοποιούνται πάνω στο δέρμα.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό πέλματος και περάστε τη λωρίδα συγκράτησης μεταξύ του μεγάλου δακτύλου και του δεύτερου δακτύλου (1).
 - Τα εξογκώματα αυτόματου μπλοκαρίσματος από σιλικόνη (εσωτερική όψη λωρίδας) θα πρέπει να είναι σε επαφή με το δέρμα και το πλέγμα σιλικόνης (εξωτερική όψη της λωρίδας) σε επαφή με την κάλσα.
 - Ρυθμίστε τη θέση του προστατευτικού πέλματος στη βάση των δακτύλων (2) δίχως να τραβήξετε υπερβολικά τη λωρίδα.
 - Για βέλτιστο κράτημα, μην τα φοράτε ξυπόλητοι αλλά με κάλτσες από επάνω. Μη χρησιμοποιείτε καλλυντικά ευδάτωσης πριν από τη χρήση.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Πλύση σε πλυντήριο στους 40°C ή στο χέρι (χωρίς τρίψιμο), αφήστε να στεγνώσουν φυσιολογικά. Δεν σιδερώνονται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης, θα πρέπει να πλένετε το προϊόν μετά από κάθε χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το προϊόν έχει υποβληθεί σε όλες τις νόμιμες δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10993-1 για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
- Ωστόσο, εάν παρατηρηθεί δερματική αντίδραση, διακόψτε άμεσα τη χρήση και ενημερώστε την MILLET Innovation.
- Δεν χρησιμοποιούνται σε ανοικτές πληγές.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με αρτηρίτιδα, διαβήτη, πολυνευρίτιδα ή νευροπάθεια των κάτω άκρων.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 74% σιλικόνη, 26% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστικού. Η MILLET Innovation δεν ευθύνεται σε περίπτωση χρήσης που δεν είναι σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του κατασκευαστή.



FRANÇAIS



ENGLISH



DEUTSCH



ITALIANO



PORTUGUÊS



NEDERLANDS



ESPAÑOL



PROTECTIONS PLANTAIRE

EPITHELIUMTACT 05


FONCTIONNALITÉS :

Les protections plantaires EPITHELIUMTACT 05 intègrent un gel de silicone de seulement 1.7 mm d'épaisseur qui a été spécialement développé pour répartir efficacement les pressions et absorber les frictions sans créer d'instabilité sous l'avant-pied. Elles soulagent ainsi les douleurs et préviennent les risques d'échauffement, de brûlure, de formation d'ampoules ou de callosités.

CONSEILS D'UTILISATION :

Ces protections sont à utiliser à même la peau.

- Enfiler la protection plantaire et placer la bretelle de maintien entre le gros orteil et le deuxième orteil (1).
- Les picots autobloquants en silicone (face intérieure de la bretelle) doivent se retrouver en contact avec la peau et le maillage en silicone (face extérieure de la bretelle) en contact avec la chaussette.
- Ajuster la position de la protection plantaire à la base des orteils (2) sans trop étirer la bretelle.
- Pour un maintien optimal, ne pas les porter pieds nus mais avec des chaussettes par-dessus. Ne pas appliquer de cosmétiques hydratants avant utilisation.

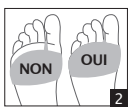

ENTRETIEN :

- Laver en machine à 40° C ou à la main (sans frotter), laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.


IMPORTANT ! Pour garantir une bonne tenue, il est nécessaire de laver les protections après chaque utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Le produit a fait l'objet de tous les tests réglementaires imposés par la norme ISO 10993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si néanmoins une réaction cutanée était observée, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.
- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynevrite, de neuropathie des membres inférieurs, ne pas utiliser le produit.

COMPOSITION : 74 % silicone, 26 % tissu polyamide/élasthanne.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.

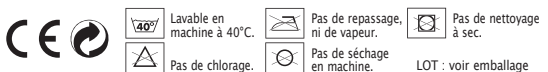

PLANTAR PROTECTORS

EPITHELIUMTACT 05


FUNCTIONS:

The EPITHELIUMTACT 05 plantar protectors include a silicone gel just 1.7mm thick which has been specially developed to effectively distribute pressure and absorb friction without creating instability under the forefoot. They therefore relieve pain and prevent the risk of overheating, burning, blistering and callouses.

RECOMMENDATIONS FOR USERS:

These protectors should be used directly on the skin.

- Put on the plantar protector and place the support strap between the big toe and the second toe (1).
- The interlocking silicone dots (on the inner side of the strap) should be in contact with the skin, with the silicone meshing (outer side of the strap) in contact with the sock.
- Adjust the position of the plantar protector at the base of the toes (2) taking care not to pull the strap too tight.
- For optimum support, do not wear the protectors barefoot. Always wear socks over the top. Do not apply moisturising products before use.

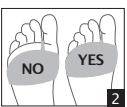

WASHING INSTRUCTIONS:

- Machine wash at 40°C or hand wash (without rubbing), leave to dry naturally. Do not iron.


IMPORTANT! To guarantee good hold, the protectors must be washed after each use.

CONTRAINDICATIONS:

- The product has undergone all the regulatory tests required by ISO 10993-1 relative to products that come into contact with the skin. However, if any skin reactions are observed, stop using the product immediately and contact MILLET Innovation.
- Do not use on an open wound.
- Persons suffering from arthritis, diabetes, polyneuritis, and neuropathy of the lower limbs should not use this product.

COMPOSITION: 74% silicone, 26% polyamide/elastane fabric.

MILLET Innovation cannot be held liable in cases where the manufacturer's recommendations have not been followed during use.

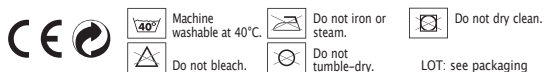

FUSSSOHLEN-SCHUTZ

EPITHELIUMTACT 05


FUNKTIONEN:

Die Fußsohlen-Schutzpads EPITHELIUMTACT 05 bestehen aus einem nur 1.7 mm dicken Silikonkugel, das zur Verteilung von Druck und zum Dämpfen von Erschütterungen dient, ohne dabei den Vorderfuß zu destabilisieren. Sie wirken somit schmerzlindernd und sind vorbeugend gegen Überhitzung, Verbrennungen, Blasenbildung oder Hornhaut.

ANWENDUNGSTIPPS:

Diese Pads sind direkt auf der Haut zu tragen.

- Legen Sie die Fußsohlen-Schutzpads an und platzieren Sie die Pflegeschlaufe zwischen dem Großen und dem zweitgrößten Zeh (1).
- Die Picots aus Silikon (innere Seite der Schlaufe) müssen Kontakt mit der Haut haben und die Maschen aus Silikon (äußere Seite der Schlaufe) müssen in Kontakt mit dem Strumpf sein.
- Versuchen Sie beim Zurechtrücken der Fußsohlen-Schutzpads am unteren Ende der Zehen (2) die Schlaufe nicht zu sehr zu dehnen.
- Tragen Sie die Schutzpads nicht barfuß, sondern mit Strümpfen, um sie so lange wie möglich zu schonen. Keine feuchtigkeitsspendenden Kosmetika vor der Verwendung auftragen.

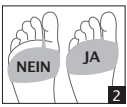

PFLEGE:

- Maschinen- oder Handwäsche bei 40°C (ohne Schrubben), an der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

WICHTIG! Für optimalen Halt muss das Produkt nach jeder Verwendung gewaschen werden.

KONTRAINDIKATIONEN:

- Das Produkt wurde allen im Rahmen der Norm ISO 10993-1 vorgeschriebenen Tests unterzogen, welche die Produkte für direkten Hautkontakt betreffen. Falls trotzdem eine Hautreaktion auftritt, sollten Sie die Verwendung sofort unterbrechen und die Firma Millet Innovation benachrichtigen.
- Nicht über einer offenen Wunde verwenden.
- Personen mit Arthritis, Diabetes, Polyneuritis, oder Neuropathie der unteren Extremitäten sollten dieses Produkt nicht verwenden.

ZUSAMMENSETZUNG: 74 % Silikon, 26 % Polyamid/Elasthan.

MILLET Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers.



PROTEZIONI PLANTARI

EPITHELIUMTACT 05

FUNZIONALITÀ:

Le protezioni plantari EPITHELIUMTACT 05 sono costituite da un gel di silicone dello spessore di soli 1.7 mm appositamente sviluppato per redistribuire efficacemente le pressioni e assorbire le frizioni senza creare instabilità sotto l'avampiede. Esse alleviano così il dolore e prevengono i rischi di infiammazione e di bruciore, nonché la formazione di vesciche o callosità.

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Le protezioni devono essere utilizzate a diretto contatto con la pelle.

- Infilare la protezione plantare e posizionare la linguetta di tenuta tra l'alluce e l'indice del piede (1).
- Gli inserti antiscivolo in silicone (parte interna della linguetta) devono essere a contatto con la pelle, mentre il reticolo di silicone (parte esterna della linguetta) deve essere a contatto con il calzino.
- Aggiustare la posizione della protezione plantare alla base delle dita (2) senza tirare eccessivamente la linguetta.
- Per una tenuta ottimale, indossare una calza o un calzino sopra la protezione. Non applicare cosmetici idratanti prima dell'uso.



MANUTENZIONE:

- Lavare in lavatrice a 40°C o a mano (senza strofinare); lasciare asciugare in modo naturale. Non stirare.

IMPORTANTE! Per garantire una buona tenuta, è necessario lavare il prodotto dopo ogni utilizzo.

CONTROINDICAZIONI:

- Il prodotto è stato sottoposto a tutti i test previsti dalla norma ISO 10993-1 relativa ai prodotti posti a contatto con la pelle. Qualora si dovesse tuttavia osservare una reazione cutanea, interrompere immediatamente l'utilizzo e informare la società MILLET Innovation.
- Non applicare su lesioni non protette.
- Non adatto a persone che soffrono di arterite, diabete, polinevrite e neuropatia degli arti inferiori.

COMPOSIZIONE: 74 % silicone, 26 % poliammide/elastan.

MILLET Innovation non potrà essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante.



PROTEÇÕES PLANTARES

EPITHELIUMTACT 05


FUNCIONALIDADES:

As proteções plantares EPITHELIUMTACT 05 são constituídas por um gel de silicone com apenas 1,7 mm de espessura que foi especialmente desenvolvido para distribuir eficazmente as pressões e absorver as fricções sem criar instabilidade sob o ante pé. Deste modo, aliviam as dores e previnem o risco de sobreaquecimento, de queimadura, de formação de bolhas e de calosidades.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Estas proteções são para utilizar diretamente sobre a pele.

- Enfiar a proteção plantar e colocar a alça de suporte entre o dedo grande e o segundo dedo do pé (1).
- As pontas de silicone autobloqueantes (face interior da alça) devem ficar em contacto com a pele e a rede de silicone (face exterior da alça) em contacto com a meia.
- Ajustar a posição da proteção plantar à base dos dedos (2) sem esticar muito a alça.
- Para obter uma melhor fixação, não utilizar com os pés nus, calçar meias por cima das proteções. Não aplicar cremes hidratantes na pele antes da utilização.

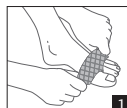

MANUTENÇÃO:

- Lavar à máquina a 40 °C ou à mão (sem esfregar), deixar secar naturalmente. Não passar a ferro.


IMPORTANTE! Para garantir uma boa aderência, é necessário lavar as proteções após cada utilização.

CONTRAINDICAÇÕES:

- O produto foi sujeito a todos os testes regulamentares impostos pela norma ISO 10993-1 referente aos produtos que entram em contacto com a pele. Se, no entanto, ocorrer qualquer reação cutânea, é conveniente parar imediatamente a utilização e informar a empresa MILLET Innovation.
- Não usar sobre uma ferida sem proteção.
- No caso de pessoas que sofrem de arterite, de diabetes, de polinevrite, de neuropatia dos membros inferiores: não utilizar o produto.

COMPOSIÇÃO: 74 % silicone, 26% de tecido em poliamida/elastano.

A empresa Millet Innovation não poderá ser responsabilizada em caso de uso não conforme com as recomendações do fabricante.

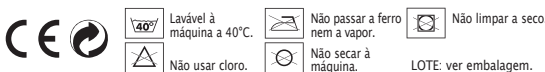

VOORVOETBESCHERMERS

EPITHELIUMTACT 05


FUNCTIES:

De EPITHELIUMTACT 05 voorvoetbeschermers bestaan uit een silicongel van slechts 1,7 mm dik die speciaal is ontwikkeld om de druk te verspreiden en wrijvingen te absorberen zonder de voorvoet uit balans te brengen. Ze verlichten ook de pijn en voorkomen de kans op verhitting, branderig gevoel, blaas- en eeltvorming.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Deze beschermers worden op de blote huid aangebracht.

- Trek de beschermer aan met het bevestigingslipje tussen de grote teen en de tweede teen (1).
- LDe antislipnetjes van siliconen (binnenkant van het lipje) moeten in contact zijn met de huid en het maaswerk van siliconen (buitenkant van het lipje) moet tegen de sok aan zitten.
- Zorg dat de beschermer goed tegen de basis van de tenen aanzit (2) zonder het lipje teveel uit te rekken.
- Draag voor een optimale ondersteuning de beschermers niet met blote voeten maar met sokken eroverheen. Voor het gebruik geen hydraterende cosmeticaproducten aanbrengen.

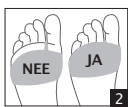

ONDERHOUD:

- Machinewasbaar op 40°C of handwas (niet wrijven), aan de lucht laten drogen. Niet strijken.


BELANGRIJK! Voor een goede vormvastheid moeten de beschermers na elk gebruik gewassen worden.

CONTRA-INDICATIES:

- Het product heeft alle tests ondergaan die worden voorgeschreven door de ISO norm 10993-1 inzake producten die in aanraking komen met de huid. Mocht u toch een huidreactie vaststellen, stop dan meteen met het gebruik van het product en breng MILLET Innovation op de hoogte.
- Niet gebruiken op een onbeschermde wond.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie in de onderste ledematen mogen het product niet gebruiken.

SAMENSTELLING: 74 % siliconen, 26 % polyamide/elasthaan weefsel.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant.

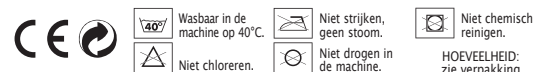

PROTECCIONES PLANTARES

EPITHELIUMTACT 05


FUNCIONES:

Las protecciones plantares EPITHELIUMTACT 05 integran un gel de silicona de tan solo 1,7 mm de espesor especialmente desarrollado para repartir eficazmente las presiones y absorber las fricciones sin crear inestabilidad debajo del antepié. De este modo, alivian los dolores y previenen los riesgos de calentamiento, quemazón, formación de ampollas o callosidades.

CONSEJOS DE USO:

Estas protecciones se deben usar directamente sobre la piel.

- Colóquese la protección plantar y sitúe el tirante de sujeción entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie (1).
- Los dientes autoblocantes de silicona (cara interior del tirante) deben estar en contacto con la piel y la malla de silicona (cara exterior del tirante) en contacto con el calcetín.
- Ajuste la posición de la protección plantar a la base de los dedos del pie (2) sin estirar demasiado el tirante.
- Para una sujeción óptima, no lleve los pies descalzos sino con calcetines. No aplique cosméticos hidratantes antes de su uso.

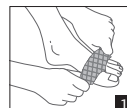

MANTENIMIENTO:

- Lavar a máquina a 40 °C o a mano (sin frotar), dejar secar naturalmente. No planchar.

¡IMPORTANTE! Para garantizar que se mantenga en su posición, es importante lavar las protecciones después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES:

- El producto se ha sometido a todas las pruebas reglamentarias conforme a la norma ISO 10993-1 sobre productos en contacto con la piel. No obstante, si se observara una reacción cutánea, convendría cesar inmediatamente el uso y avisar a la empresa MILLET Innovation.
- No utilizar sobre heridas no protegidas.
- En caso de personas que sufran arteritis, diabetes, polineuropatía o neuropatía de los miembros inferiores, no utilice este producto.

COMPOSICIÓN: 74 % de silicona, 26% de tejido de poliamida/elastano.

Millet Innovation no será responsable en caso de uso no conforme a las recomendaciones del fabricante.

